



# СКРИНИНГОВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ МАММОГРАФ

## МАММО-РП

## ОПТИМАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ

**Маммо-РП** — предназначен для скрининговых и диагностических исследований для выявления рака молочной железы на ранней стадии.

Маммограф обладает современным эргономичным дизайном. Все движения маммографа моторизованы, что позволяет осуществлять повороты штатива на любой угол. Автоматическая фиксация дуги в стандартных проекциях и компенсация высоты при её вращении облегчает работу персонала.

Уникальное сочетание высокого качества изображения (10 пар линий/мм) и низкой дозы — основа качественного скрининга для выявления начальной стадии РМЖ



## ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат может поставляться в трёх разных комплектациях: с плоскопанельным детектором, с CR-дигитайзером, с проявочной машиной.

Цифровой плоскопанельный детектор повышает пропускную способность рентгенкабинета, моментально передавая изображение на рабочую станцию лаборанта.

Широкий динамический диапазон, высокое пространственное разрешение (не менее 10 пар линий/мм) и низкий уровень шумов плоскопанельного детектора обеспечивают улучшенную визуализацию молочной железы для обнаружения опухолей и микрокальцинатов, благодаря чему у врача будет реже возникать потребность в дополнительных прицельных и увеличенных снимках.

**Маммо-РП** отвечает самым последним требованиям диагностики молочной железы и на сегодняшний день является одним из лучших маммографов представленных на Российском рынке.

## РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ВРАЧА И ЛАБОРАНТА

Программное обеспечение соответствует международному протоколу DICOM 3.0. Это позволяет при необходимости интегрировать маммограф в любую современную медицинскую информационную систему.

Программа разрабатывалась в тесном сотрудничестве с рентгенологами, поэтому содержит не только общепринятые формализованные протоколы, но и необходимые формы периодических отчётов. В программе заложены практически неограниченные возможности обработки полученного изображения специальными фильтрами.

Рабочие места врача и лаборанта комплектуются профессиональным оборудованием необходимым для полноценного проведения рентгенодиагностического исследования.

Два медицинских монохромных монитора высокого разрешения обеспечивают врачу комфортные условия для точной диагностики.

Медицинский принтер позволяет распечатать снимки на плёнке, сохранив высокое качество изображения.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН



Поворот штатива на любой угол, автоматическая фиксация дуги в стандартных проекциях и компенсация высоты при её вращении


Кнопка аварийного отключения

Набор компрессионных пластин разного размера, в том числе и для прицельной съёмки

Управление компрессией с помощью блока педалей

Специальные ручки удобны для пациентки и облегчают её позиционирование

Прозрачная передвижная рентгенозащитная ширма

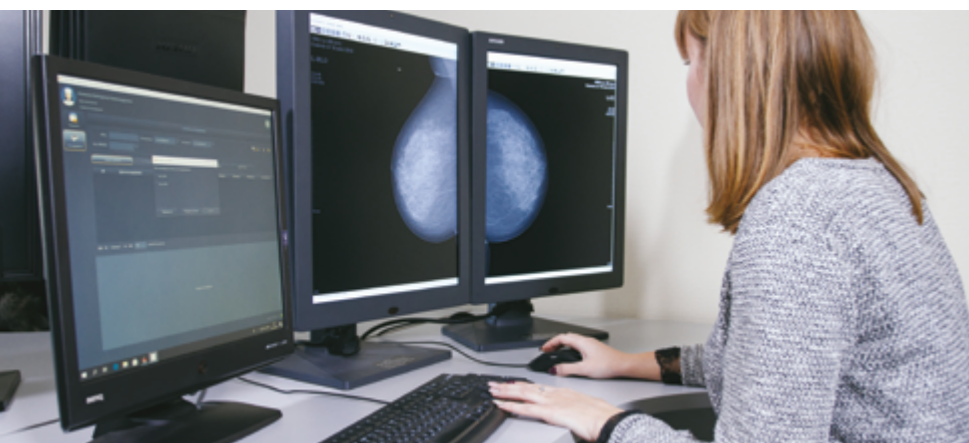

## ПЕРЕДВИЖНОЙ КАБИНЕТ ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СКРИНИНГА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНОВ

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Ранняя диагностика снижает смертность от заболевания, так как рак молочной железы является самым излечимым видом онкологии.

Скрининговые обследования для жителей удалённых, недостаточно оснащённых населённых пунктов становятся доступными.

Передвижной маммографический кабинет даёт уникальную возможность пройти обследование на современном цифровом маммографе Маммо-РП.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики и внешний вид оборудования. Продукция зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

НПАО «АМИКО»  
а/я 22, Москва, 117556  
тел.: +7 495 742-41-60  
info@amico.ru



[www.amico.ru](http://www.amico.ru)